



衛署醫器製壹字第 004393 號

高市醫器廣字第10201001 號

冷熱適宜。穩定包覆

產品品名	「綺思」冷熱敷墊 (未滅菌) Chloson Cold/Hot Pad (Non-Sterile)
包裝	2入
產品尺寸	12x25cm / piece
產品特色	1.環保材質，無毒凝膠，冷凍後不會變硬，SGS 無毒凝膠 2.可使用微波爐或浸泡熱水加熱 3.可重複使用
效能或用途說明	冷敷 / 可減緩急性傷害的紅腫、瘀血 可當冰枕使用或冰敷所需之處。 熱敷 / 可舒緩肌肉與關節之痠痛

使用時機: 當身體出現不適需要冷熱敷舒緩解壓時。(請依照醫師建議使用)

使用方法

(冷敷)

1. (置於冷凍庫: 20 分鐘

(熱敷 / 微波爐)

1. 請將微波爐盤面擦拭乾淨。

使用時間 冷敷：有效冰敷時間30分鐘 *冷敷適合溫度 3℃~15℃
熱敷：有效熱敷時間:15~30分鐘
*熱敷適合溫度:40℃~55℃



- 注意事項 (請依照醫師建議使用)
- 1.請勿在同一個地方使用過久時間,以免燙傷及凍傷。
 - 2.皮膚若有外傷請勿使用本產品。
 - 3.請勿在本產品上重壓或用尖銳物品碰觸。
 - 4.本產品若破裂弄到衣物時,請先用濕布擦拭後再用水清洗。
 - 5.不可使用於非原來的用途上。
 - 6.避免放置在高溫,多濕,太陽直射處。
 - 7.萬一冷熱敷墊破裂,碰到身體或眼睛時,請用溫水沖洗後盡快就醫。
 - 8.如意外誤食產品內凝膠,應即就近送醫急診,以做評估與進一步處理。
 - 9.請勿放置兒童易取處,並須於成年監護下使用。
 - 10.請依垃圾分類法之塑膠製品丟棄。

主要成分 外袋/NL/PE
凝膠成分 殺菌劑、水、食用丙二醇、甲基纖維素
產品尺寸 12x25cm/piece
許可證字號 衛署醫器製壹字第004393 號
批號 同製造日期
製造日期 標示於包裝盒上
藥商名稱 綺思有限公司
住址 高雄市前金區自立橫路100 號10 樓之2

保存期限 5年

產地 台灣

老少咸宜，最體貼的好幫手
適合多部位使用
(使用部位)

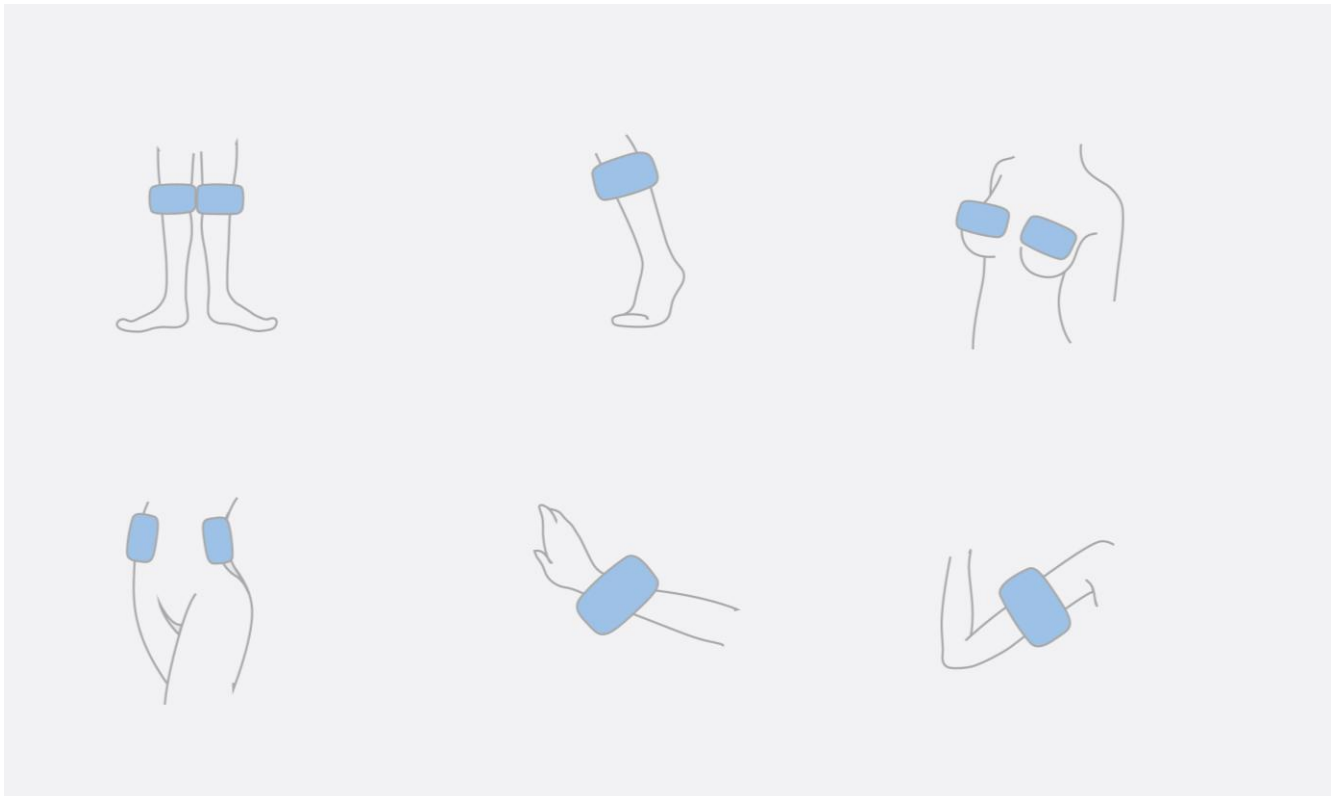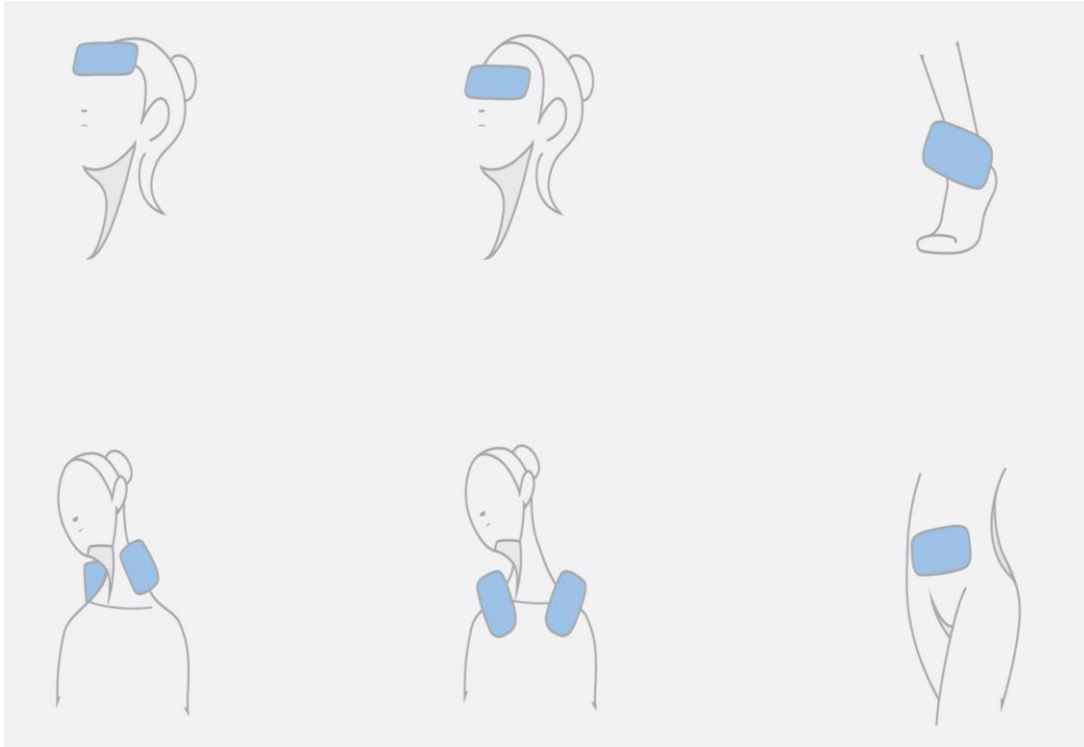

B. (Hot compress/Microwave)

1. Make sure the inner dish of the microwave is clean
2. Lay flat the pad on the inner dish and heat up for 30 sec. in a 500W microwave. (Heating time may vary according to different microwave power)
3. May increase the desired temperature by reheating the pad for no longer than 5 seconds per episode.

C. (Cold compress) Store the pad in the freezer before use

1. Put the pad in the freezer for 20 minutes, or
2. In ice water for 30 minutes, or
3. In a fridge for 1 hour.
4. Remove the pad from the freezer or cold water and wrap it with a cloth or insert it in the Chloson Insulate Cover for better result.
5. Store the pad in a clean bag when not in use.

*Duration of use:

1. Effective cold compress time: 30 minute
2. Suitable cold compress temperature: 3°C~15°C
3. Effective hot compress time: 15~30 minute
4. Suitable hot compress temperature: 40°C~55°C

***Caution:**

1. In order to avoid burns and frostbite, do not use the pad on the same area for too long.
- 2 Do not use this product if there is skin injury.
- 3 Do not over compress the product or use sharp object to pinch the pad surface.
- 4 If the gel leaks out and contaminate clothing, wipe it with wet cloth and wash it with water.
- 5 Do not use the product in any way that is not purposely designed for
- 6 Avoid storage in high temperature, moist or direct sunlight environments
- 7 If the substance leaks out and touches the body or eyes, flush thoroughly with warm water and seek medical attention immediately.
- 8 Seek medical attention if accidental swallowing does occur.
- 9 Keep out of reach for children and use under adult guidance.

10. The content should be disposed according to plastic waste classification.

***Materials:**

Outer Material: Nylon + PE

Contents: Non-toxic gel

*Permit number: Class I Medical device
No. 004393

*Shelf life: 5 years

*Made in Taiwan

*Lot no.: Same as Manufacture date

*Date of manufacture: as marked on the
box

*Company Name: Chloson Co., Ltd.



分開獨立使用



頸肩



手部



腰部